FreeStyle Libre

【製品情報】

●FreeStyle リブレPro センサー

使い捨てアプリケーター同梱

承認番号：22800BZX00227000



製品番号	75165-01
JAN コード	4987439084237
包装単位	1個
希望小売価格	6,380円（税抜）

●FreeStyle リブレPro Reader

承認番号：22800BZX00227000



製品番号	71608-01
JAN コード	4987439084220
包装単位	1台
希望小売価格	7,089円（税抜）

【データ管理ソフト】

FreeStyle リブレ Pro ソフトウェア仕様

【システム要件】 2018年6月現在

- Microsoft Windows 7（32 または 64 bit）
- Microsoft Windows 8（32 または 64 bit）
- Microsoft Windows 10（32 または 64 bit）
- macOS High Sierra

●接続には測定器本体に付属のケーブルをご使用ください。

●USB2.0ハブ、1.6GHzデュアルコアプロセッサ、2GB RAM以上が搭載されたコンピュータが必要です。
PDF形式のレポートを表示するため、Adobe® Readerが推奨されます。


●測定器データのコンピュータへの保存は、PDF形式（レポート画面）
もしくはテキストファイル形式でのみ行なうことができます。本ソフトウェア内には記録されません。

【ソフトウェア使用上の注意】

Windowsとの互換性維持、セキュリティやバグ対応等、のソフトウェアの更新・サポートは提供しておりません。
クラウド型のデータ管理ソフト「リブレView」で、FreeStyleリブレProを含むFreeStyleリブレ製品のデータ管理は引き続き可能ですので、リブレViewのご使用を検討ください。



THE MORE YOU CAN SEE, THE MORE YOU CAN DO

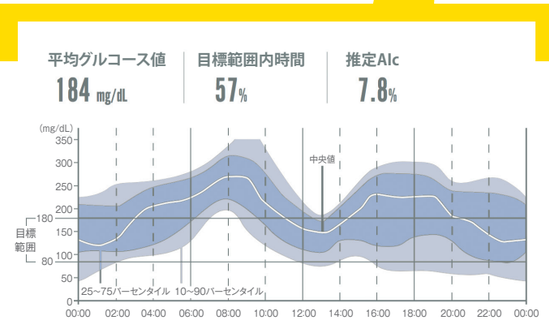

本社：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
東京都港区三田3-5-27

製造販売元：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
千葉県松戸市松飛台278
販売名：FreeStyleリブレPro　承認番号：22800BZX00227000

お客様相談窓口 0120-37-8055
営業時間 8:00-20:00（平日）、8:00-17:00（祝日）※土日除く

FreeStyle Libre

Abbott

© 2025 Abbott. All Rights Reserved.「FreeStyle」、「リブレ」、「FreeStyleリブレセンサー」と関連するブランドマークはAbbottがその権利を有しています。

ADC-17999 v3.0 06/25

FreeStyle Libre

Abbott

詳細なグルコースデータの入手・解析をより簡便に

FreeStyleリブレProシステム

センサー（使いすて）



出荷時較正済、
使用時の血糖自己測定による較正は必要ありません。

- 最長14日間、持続的に測定し、15分毎にグルコース値を自動的に記録
- 耐水性※で、患者さんがアクティブな生活を送れるよう設計

※水深1メートルで最長30分間の耐水性試験を実施済みです。

Reader




1台のReaderで
複数の患者さんに使用可能。

- 14日分の測定結果の読み取り時間は約5秒かかります

隠れていた高血糖、低血糖を把握できるグルコース変動レポート


HbA1c

過去1～2か月間の平均血糖値を反映

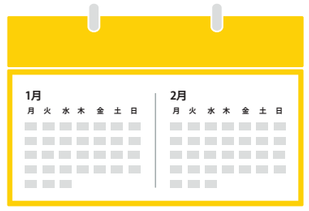


SMBG

測定した時点の血糖値のみ把握

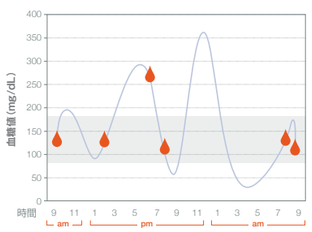

AGP※

グルコースプロファイルをわかりやすく表示

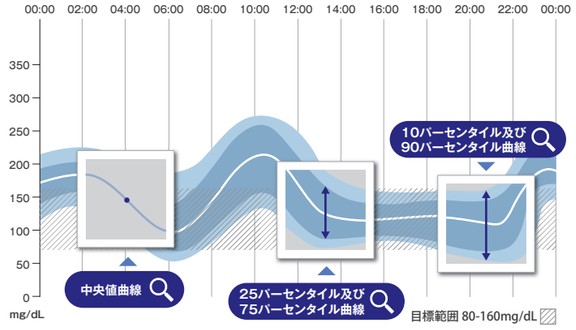


FreeStyleリブレProソフトウェアを活用することで、14日間にわたる日中および夜間のグルコース変動レポートを簡単に作成することができます。

※Ambulatory Glucose Profile

最長14日間、信頼性の高い血糖プロファイルを得るための3ステップ

1 装　着

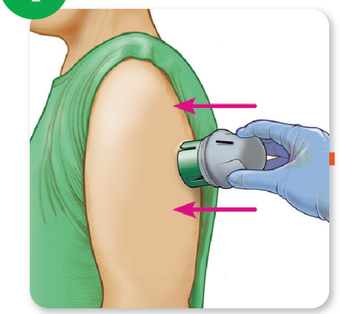

上腕後部にFreeStyleリブレProセンサーを貼りつけ、起動します。


- 装着、起動は非常に簡単です。

2 データ読み取り



センサーをReaderでスキャンし、グルコース値の測定結果を読み取ります。


3 レポート作成

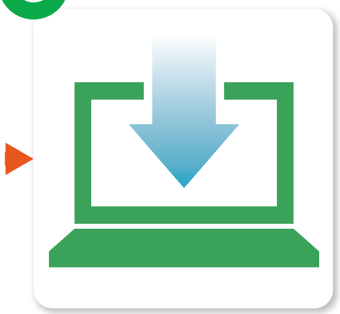

ReaderをPCに接続し※FreeStyleリブレProソフトウェアでレポートを作成します。

※付属のUSBケーブル経由

ケースレポート

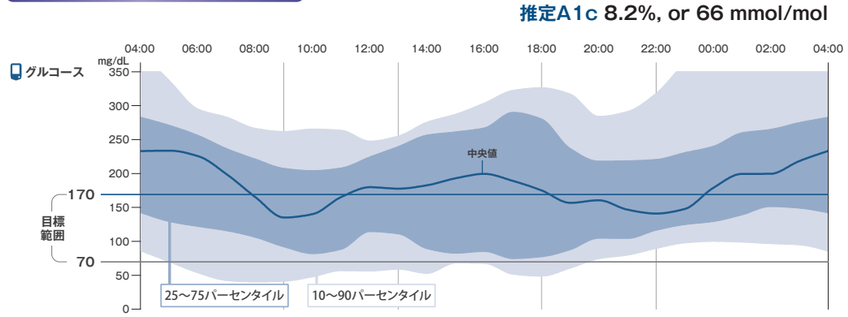

［患者背景］
64歳、女性、2型糖尿病
- 罹病期間 11年
- HbA1c 8.5%
- 基礎インスリン 8単位
- メトホルミン 1000mg/日（分2）
- グルコース値の目標範囲 70～170mg/dL

※レポート説明のための仮想症例

Q グルコース値は目標範囲内にありますか?

A ほとんどが目標値より上です。

Q 低グルコースのリスクはありますか?

A 10パーセンタイル値（下の薄い青色で示した範囲の下部分）が目標値より下であり、朝から昼にかけてと、夕方に低グルコースのリスクがあります。

Q グルコース値の日内変動はありますか?

A 日中の中央値曲線は比較的平坦ですが、夜間から朝方にかけてのグルコース変動が大きいことがわかります。

Q グルコース値の日差変動はありますか?

A 25～75パーセンタイル（濃い青色で示した範囲）が24時間を通じて幅広く、低グルコースおよび高グルコースのリスクがあることが示されます。